

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://comen.nt-rt.ru> || cnj@nt-rt.ru

MX8900/M800/ME900 Инфузионная рабочая станция Шприцевой насос/инфузионный насос


Удобство использования,
надежность и безопасность



Проще, быстрее и сильнее, чем
когда-либо

Графическое руководство по установке

Четкое руководство по установке шприцевой и инфузионной системы упрощает обучение и снижает вероятность неправильного использования.

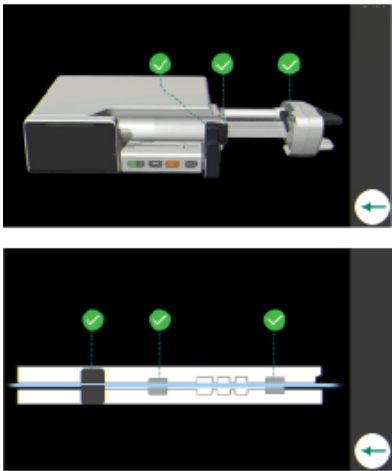

Удобный процесс запуска



Автоматическое определение шприцов	Поддерживаются шприцы различных марок	Память для параметров
Поддерживаются шприцы объемом 2 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50 мл/60 мл.	Поддерживаются универсальные шприцы и инфузионные наборы.	Запись последних параметров инфузии для последующих операций.

Intelli. Fast™

Intelli. Fast™ от компании Comen позволяет начать инфузию в течение 9 с после запуска аппарата.



Точная доставка

Comen M800/ME900 обеспечивает высокую точность и согласованность долгосрочной инфузии.

Intelli. Plan™

Comen M800 и ME900 поддерживают индивидуальные планы лечения для доставки определенных препаратов пациентам. Предварительная настройка и сохранение параметров инфузии в насосах позволяет медицинским работникам легко применять и



изменять часто используемые
параметры инфузии и
препараты.



Ваша безопасность - наш главный приоритет

Система динамического давления (DPS)

обеспечивает мониторинг давления в режиме
реального времени и отображает изменение
давления во время инфузии.

- Цветные, графические и числовые индикаторы давления помогают прогнозировать окклюзию заранее.
- Широкий диапазон обнаружения окклюзии, 12 предварительно заданных уровней безопасности



50

Нормальная



420

Почти окклюзия



525

Окклюзия



Защита от болюса

Пользователи могут не беспокоиться об окклюзии. Устройства Comen M800/ME900 поддерживают функцию защиты от болюса, которая сбрасывает высокое давление и снижает непредвиденный болюс для защиты пациентов.

Непрерывная титрация

Скорость инфузии можно изменить, не прекращая ее. Новая скорость активируется после подтверждения. Стабильная скорость инфузии снижает колебание концентрации лекарственного вещества в плазме



Обширный каталог лекарственных препаратов

До 5000 видов лекарственных препаратов, что соответствует различным клиническим требованиям. Поддержка простого поиска определенных препаратов в обширном каталоге.

Система снижения ошибки дозировки (DERS)


Эта функция, спасающая жизнь, позволяет значительно снизить вероятность ошибки поставки лекарств.

- Интеллектуальная настройка параметров: снижает необходимость ввода данных и расчетов вручную.
- Своевременная сигнализация: оповещает медицинских работников о неправильном порядке применения лекарственных препаратов и ошибках в расчетах.

Просмотр кривых инфузии

Функция просмотра кривых инфузии упрощает мониторинг безопасности пациента во время инфузии.

Основной контроллер обеспечивает централизованный мониторинг подключенных инфузионных насосов и шприцевых насосов, в том числе кривой давления, кривой скорости и кумулянтной кривой.

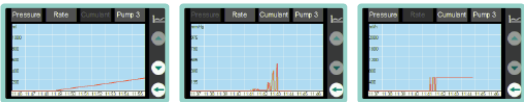


Тщательная разработка повышает удобство использования






Производство высочайшего уровня

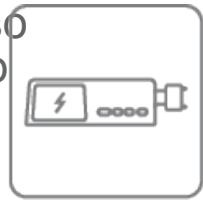

Система автоматической регуливовки яркости

Полная
совместимость
компонентов,
улучшенная
защита от
попадания
жидкости

Постоянно
обеспечивает
необходимую яркость

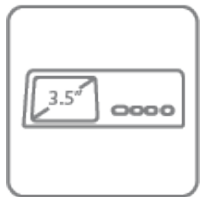

3,5- дюймовый сенсорный экран



Удобный пользовательский интерфейс

Улучшает
условия
работы
пользователей

Обеспечивает быстрый
доступ к данным и
настройкам инфузии



Интеллектуальное обнаружение пузырьков воздуха

Функция интеллектуального обнаружения пузырьков воздуха повышает уровень безопасности за счет мониторинга воздуха в линии.

Благодаря встроенному датчику пузырьков система сигнализации не пропустит ни один пузырек воздуха на 6 уровнях защиты.

Это повышает точность сигнализации о наличии воздуха в линии за счет вычисления общего числа пузырьков каждые 15 минут в устройстве ME900.




Датчик падения

Отслеживает общую инфузию для обеспечения точности, обнаруживает пустой контейнер с 3 уровнями чувствительности.


Двойной датчик давления

Двойной датчик давления окклюзии в восходящем/нисходящем потоке обеспечивает точную сигнализацию.

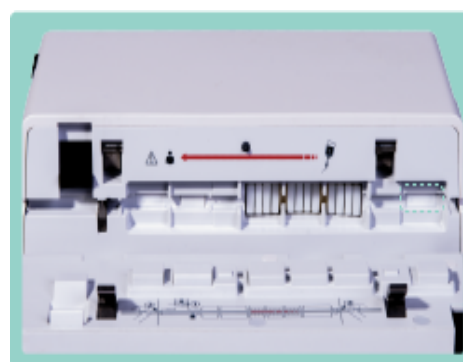

Автоматическая компенсация потока


Автоматическая компенсация потока повышает точность, дополняя потери потока из-за искажения инфузионной системы после длительного использования и в результате перистальтики.

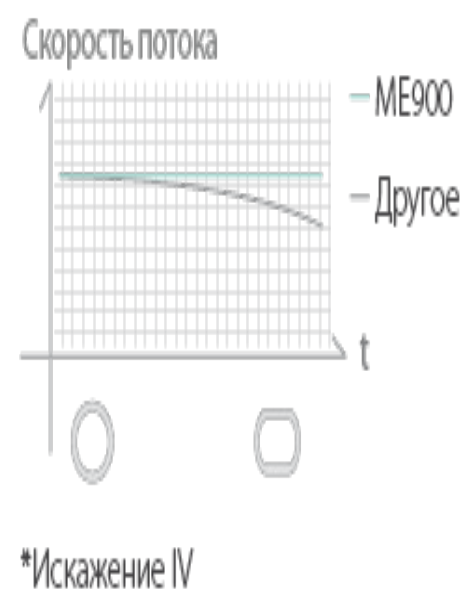

Гибкая комбинация, различные области применения


Модульный дизайн Plug-and-Play обеспечивает высокий уровень гибкости для различных сценариев инфузии с возможностью подключения 2–24 инфузионных насосов.

- Палаты
- Передача
- NICU
- Отделение интенсивной терапии/
операционные

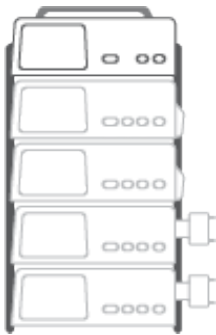


Основной контроллер

Упрощенное использование с централизованным управлением

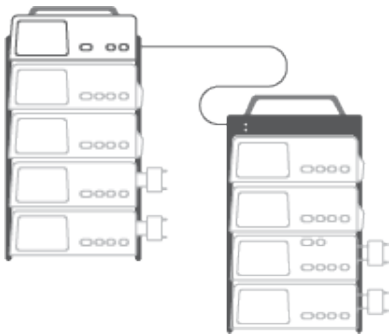


Дополнительный контроллер

Получает инструкции от основного контроллера и обеспечивает зарядку одним кабелем

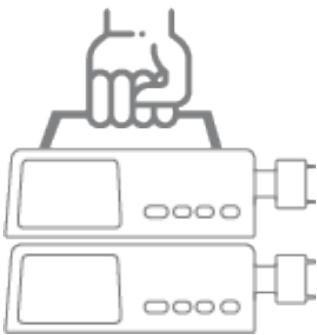


Ручка для переноски

Используется для переноски системы

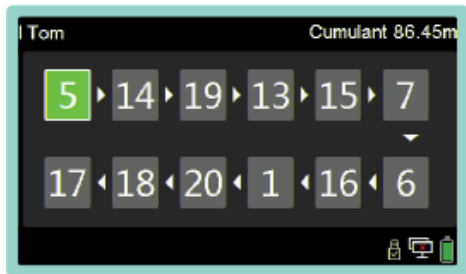

Интегрированное многоканальное лечение

Определяемые пользователем последовательности (S1–S12), поддержка автоматического многоканального лечения. Последовательности можно активировать синхронно, одновременно доставляя разные препараты.

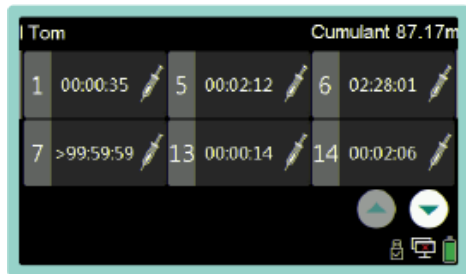

Единая консоль управления

Поддержка коллективного расчета общего объема. Поддержка настройки давления окклюзии, размера пузырьков и сигнализации об общем объеме пузырьков воздуха. Поддержка вызова медсестры и экспорта файлов.



Установка без инструментов и автоматическая блокировка



Один шнур питания для зарядки

Эффективное соединение

Централизованное управление

Поддержка проводного
подключения и WiFi для интеграции
клинических данных.

Доступ к HIS/CIS/EMR по протоколу
HL7.

Зарезервировано несколько портов
для сканера штрихкодов, вызова
медсестры и датчика падения.



Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	